

MIMAMO-RU

ミマモル

患者様の動きを **ピンポイント** で感知

「MIMAMO-RU」は、コンパクトな設計であらゆる場所に設置可能です。アームで自在に感知場所を調整し、ピンポイントに動きを感知できます。

Point 01 **ピンポイントで感知**

狭い範囲を感知する赤外線センサーで、特定部分の動きを捉えます。不要な誤報を減らし、感知が必要な動きだけをお知らせします。




Point 02 **自由自在なアーム**

アームを動かせば、センサーの向きや高さを簡単に調整可能です。患者様の状態や状況に合わせて、最適な感知エリアを設定できます。



Point 03 **コンパクト設計**

どこにでも置けるコンパクト設計で、ベッドサイドや出入り口など、必要な場所へ手軽に設置できます。

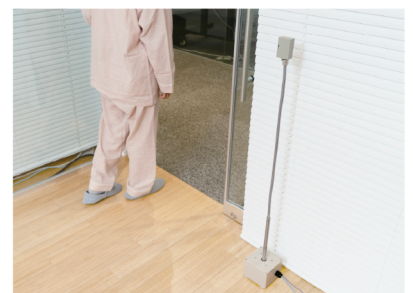

仕様

仕様項目	
名称	見守りセンサー
モデル	MIMAMO-RU (ミマモル)
本体サイズ※1	W120mm×D120mm×H1070mm
本体重量※2	3.45kg
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	38mA
使用環境	10～35℃、30～80%RH(結露なき事)
センサー検知範囲※3	100φ×900mm
ナースコール接続※4	アイホンハンド型子機用コンセント(アイホン社指定分配機使用) アイホンオプション入力用コンセント ケアコムハンド型子機用コンセント(ケアコム社指定分配機使用) ケアコムオプション入力用コンセント

※1 センサーケース下から接続パイプまでの間を700mmに設定します。スイベル、金具を含む。

※2 電源ケーブル4m、通信ケーブル4m含む。

※3 800mm程度までの範囲での使用を推奨。


※4 ナースコールメーカー指定分配機は製品標準構成に含まれておりません。

製品構成

仕様項目	
センサー	W25mm×D45mm×H65mm
接続スィベル	20φ H6.2mm 335° 回転ストッパー付
アーム	10φ H700mm フレキシブル
接続ポール	18.7φ(±2) H200mm
本体※1	W120mm×D120mm×H100mm
電源ケーブル	4m
通信ケーブル	4m


※1 ゴム脚含む。

寸法 単位[mm]

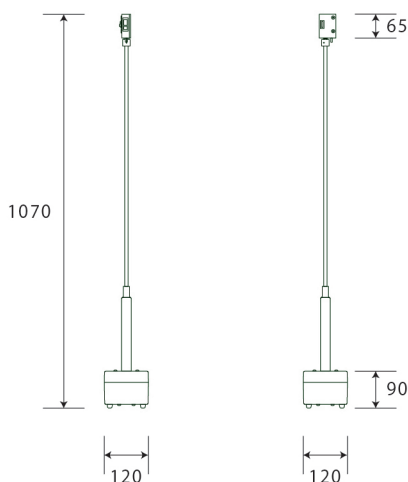

センサー感知範囲

センサー感知範囲は赤外線発光部から最大900mm。
黄色い部分の検知範囲を参考目安としてください。
縦100mm 横100mm 長さ900mmが作動有効範囲です。

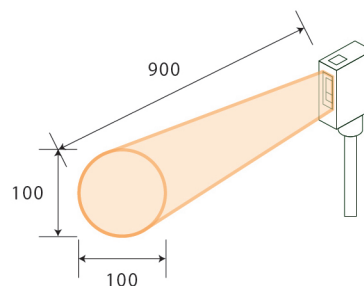

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2025年12月現在のものです。

■販売代理

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331(代)

トーショー
公式サイトは
コチラ▶



■総販売元

株式会社エフブランチ
〒920-0348 石川県金沢市松村4-342
TEL・FAX: 076-266-1618