


PTP鑑査支援システム

PeechR

GS1バーコードで複数薬品を同時にスピード照合
画像でログが記録され、履歴確認もスムーズです。

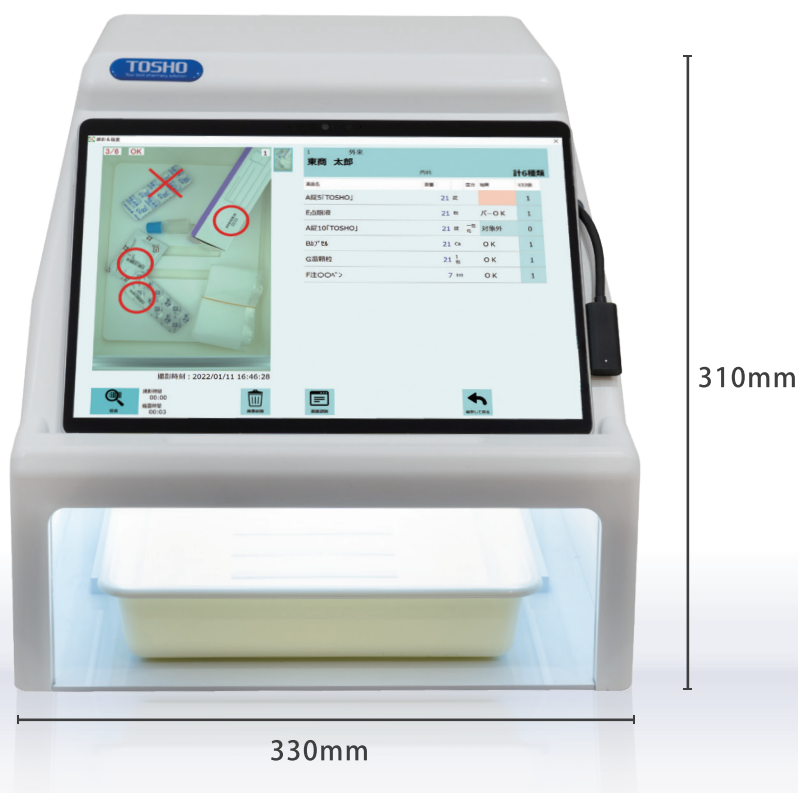

■ 簡単操作で調剤ミスを防止



取り揃えた薬品と処方箋を
画面下のトレイに入れます。



撮影画像からバーコードを
読み取り、自動的に鑑査が
スタートします。



処方データと薬品を照合して、
「○」「×」などの印と音でお知らせ。
正しい調剤をサポートします。

■ 鑑査をサポートする機能も充実

バーコードが読み取れない

薬品を照合する場合

付属のバーコードリーダーで読み取って、照合できます。



薬品のバーコードが

切れてしまっている場合



PTPシートのバーコードバーの一部が切れている、破れている、表示がない場合など、目視で確認して記録を残せます。



画像履歴が残るから、こんなときでも安心！

Peechには、鑑査した日時・患者名・処方内容・撮影画像がログとして記録できます。患者様からお問い合わせがあっても、安心して対応できます。

担当していない調剤も履歴が残っているから安心

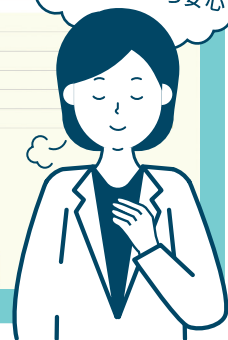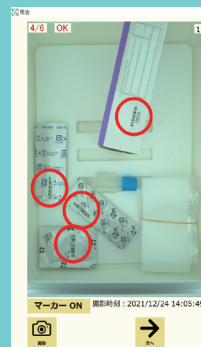


薬品のロゴを登録

パターンマッチング機能

薬品のロゴを読み込み、薬品照合を行うパターンマッチング機能で読み取り時自動で照合可能。



登録してある形と照合

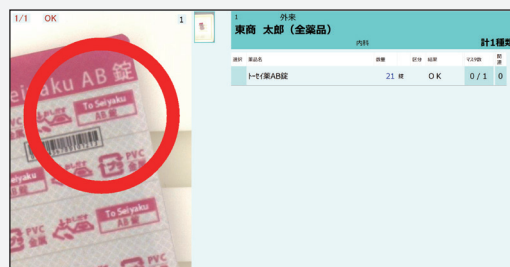

■ 仕様

名 称	PTP鑑査支援システム
型 式	PeechR
本 体 サ イ ズ※1	W330mm×D400mm×H310mm
本 体 重 量	6kg
O S	Windows11
ス ペ ッ ク	Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz 2.61 GHz 実装 RAM:8GB
対応トレーサイズ	W250mm×D300mm×H100mm
ディスプレイ	タッチパネル方式
付 属 品	タブレットPC、バックアップ用USB、バーコードリーダー
最大消費電力	160VA AC100V 50/60Hz

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含まれません。

※多数の薬品を同時照合した場合、照合に時間がかかる場合があります。

※数量鑑査はできません。

※本製品は、薬品照合する製品であり、最終鑑査を保証するものではありません。


※調剤事故による患者様および使用店舗様の損害について、弊社は責任を負いかねます。

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2024年2月現在のものです。

■ 本体サイズ

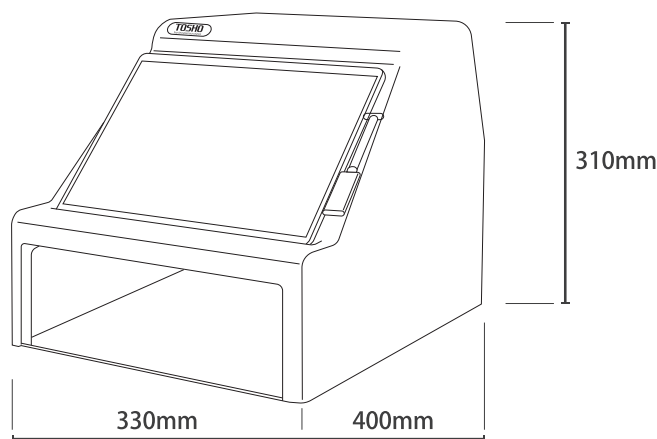

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8

TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。