


画面仕様

\\ わかりやすいタッチパネル画面でかんたん操作 //

服薬時間お知らせ画面

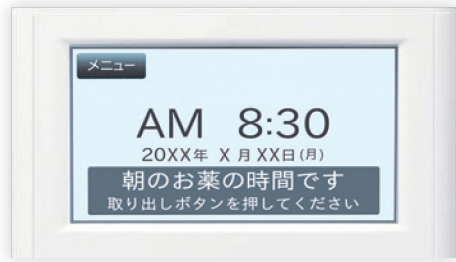

画面と音声で服薬時間をお知らせ。時間表記12時間モード/24時間モードが選択可能です。

カレンダー設定画面



日付を指定しての頓服薬や曜日ごとの服薬設定が行えます。

服薬時間設定画面



カートリッジの取り出し時間を指定して、服薬時間を設定します。

履歴画面



USBメモリを利用してパソコンなどでも服薬の確認を行えます。

服薬管理支援

服薬支援ロボ II

正しい時間、種類、用量をきちんと管理
かんたん操作で、介護や訪問看護の現場を支援します。



仕様

仕様項目	
名称	服薬支援ロボ II
型式	TS-E4KR-2000A
外形寸法	W278mm×D327mm×H325mm
本体重量	9.5kg
画面サイズ	7型ワイドタイプ
画面解像度	800×480×3 (RGB)
スピーカー最大出力	2W
スピーカー口径	57mm
電源電圧	AC100V
消費電流	0.15A (TYP)
定格周波数	50/60Hz
付属品	ピルケース:各色7個(計28個)/カセット:各色1個(計4個)

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2026年5月現在のものです。

■販売代理



株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03)3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはこちら▶
<https://www.tosho.cc/>



■販売元



ケアボット株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-19-6 ヤサカ八丁堀ビル1F
TEL: (03)6222-1062 FAX: (03)5566-1107

ケアボット公式サイトはこちら▶
<https://www.saintcare-carebot.com/>



お薬の飲み忘れ・飲み間違い・飲み過ぎを予防し、
飲み残したお薬の管理も支援します。

医師・薬剤師・看護師・ケアマネジャーとの正確な情報共有を支え、
信頼される居宅療養管理指導の獲得と継続を支援します。

服薬支援ロボIIの5つのポイント

飲み忘れを予防

薬を取り出すまで、聞き取りやすい音声で繰り返しお知らせ。人感センサー搭載で、大音量設定も可能です。

飲み間違いを予防

設定時間以外は取り出せないため、飲み間違いを防止。シンプルなボタン操作で、安全に服薬を促します。

飲み過ぎを予防

設定時間に薬を取り出さなかった場合は次の予定時間へ自動更新され、重複服用を防止。外出用の取り出し機能も完備しました。


服薬履歴をデータで管理

正確な服薬履歴データで、スムーズな情報共有を実現。残薬確認や処方調整の根拠として活用でき、最適な服薬ケアを支えます。

製品の耐久性と安全性を確保

国内基準に沿った厳しい製品試験を実施。国産ならではの高い耐久性と安全性で、長期間の安心を支えます。

タッチパネルとシンプルなボタン設計で直感的な操作が可能です。

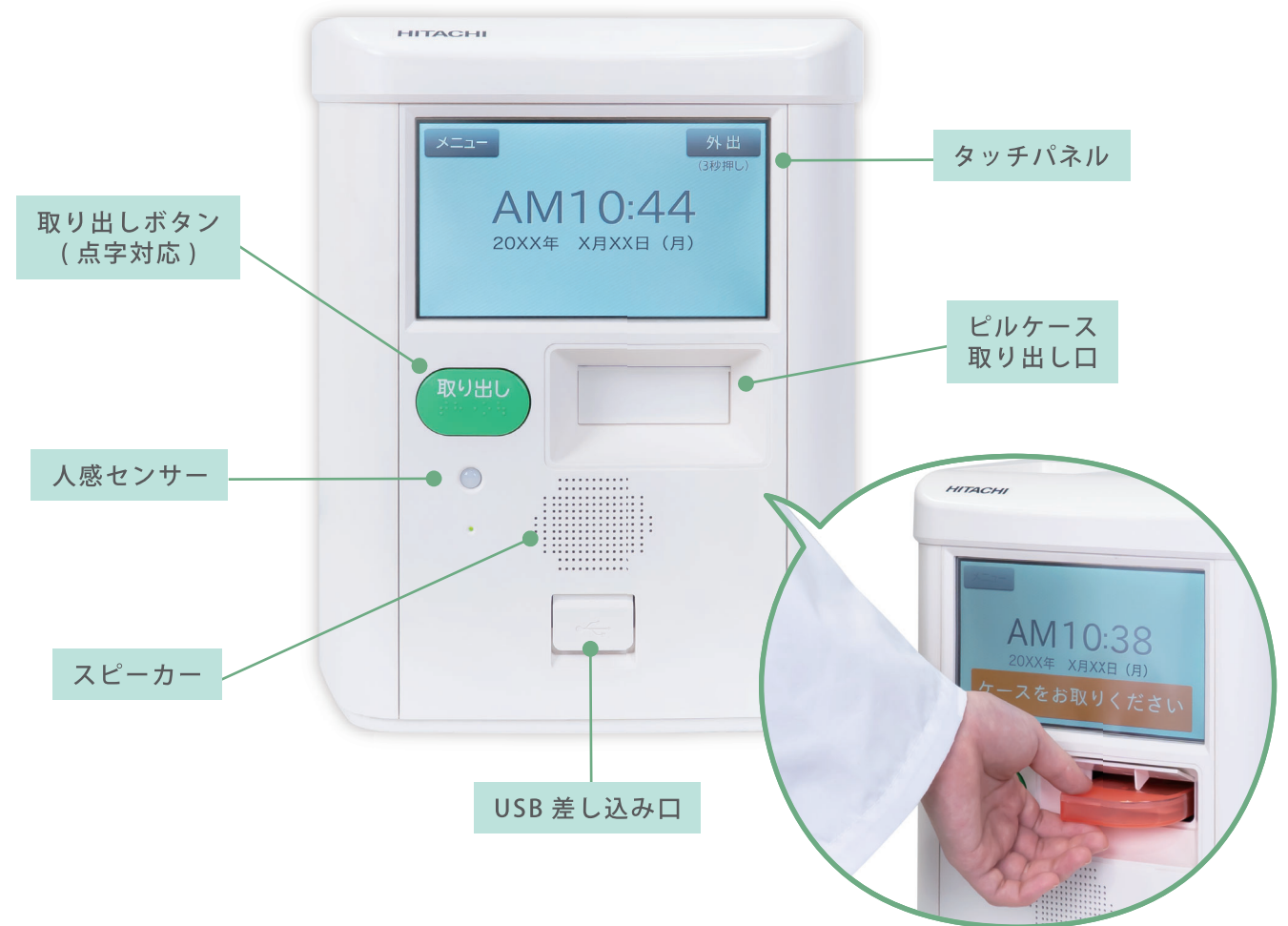

取り出しボタンを押して
ビルケースを取り出すだけの簡単操作！

カセットの色ごとに形状の違うビルケースを採用し、視覚的なわかりやすさで作業効率アップと安全性に寄与します。



一包化した薬袋もそのまま収納

半透明のビルケースは、薬品や薬袋の印字の確認も可能。色分けしたことで、セット間違いを防ぎます。



7個のビルケースをまとめて収納

カセットごとに色と形を固定。入れ間違いが起こらない設計です。



カセットを一括で交換可能

ビルケースを収納した4色のカセットは上部から取り出せて、交換も簡単です。



使用後のケースは蓋上部にセット

服薬の有無を視覚的に確認でき、飲み残しが一目でわかります。